

在宅ケアベッドの選び方

各部名称 状況に応じたベッドをお選びください。

サイドレール

寝ている人の転落、寝具の落下を防ぎます。
乗り降りの支えには介助バーをお使いください。

オーバーテーブル

サイドレールの上のせて使います。
キャスターのついた移動が自由なテーブルもあります。

ヘッドボード

マットレス

ベッド本体


フットボード

使用上のご注意

選ぶベッドによって、対応する付属品が異なります。

電動ベッドの主な機能


背上げ機能

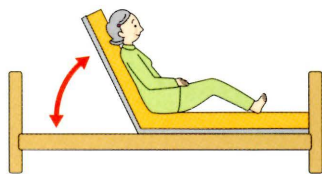

背上げ

ベッドの背を上げて、お好きな角度に調節できます。
ご利用者が起き上がる時や、食事を取る時などに便利です。


高さ調節機能

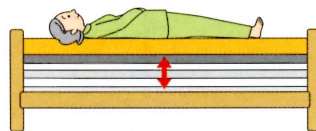

高さ調節

ベッドの高さを自動的に上下に調節できます。
ベッドから立ち上がる時に、立ち上がりやすい高さに調節すると便利です。また、介護する方の身長に合わせて高さを調節をすると、介護する方の腰にかかる負担を軽減します。

ひざ上げ機能

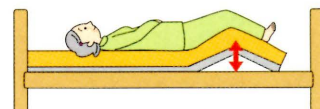

膝上げ

膝の部分上げて、お好きな角度に調節できます。
背上げの時に、膝の位置も上げると、ご利用者の身体の圧迫感を軽減します。また身体がずれ落ちるのを防止します。

モーター別機能

3モーターベッド

背上げと膝上げを別々のボタンで操作できます。



背上げ機能

好みの角度に背を上げることができます。



膝上げ機能

好みの角度で足を上げることができます。



高さ調節機能

ベッドの高さを自由に調節できます。



手元スイッチ

全ての操作を利用者自身が行えます。

2モーターベッド

背上げと膝上げが連動して同時に動きます。



背上げ機能

好みの角度に背を上げることができます。



背・膝連動機能

背上げに連動して膝を上げることができます。



高さ調節機能

ベッドの高さを自由に調節できます。



手元スイッチ

全ての操作を利用者自身が行えます。

在宅ケアベッド

2モーターベッド



「背上げ」または「ベッドの高さ調節」が操作できるベッドです。



- 楽匠S2モーターシリーズ(→p10~11)
- 楽匠2モーターシリーズ(→p13)
- 和夢シリーズ 凜 2モーター(→p14)

3モーターベッド




「背上げ」「ベッドの高さ調節」「膝上げ」が操作できるベッドです。



- 楽匠Sらくらくモーションシリーズ(→p10~11)
- 楽匠S3モーターシリーズ(→p11)
- 楽匠らくらくモーションシリーズ(→p13)
- 和夢シリーズ 凜 3モーター(→p14)

ベッドのサイズの見方

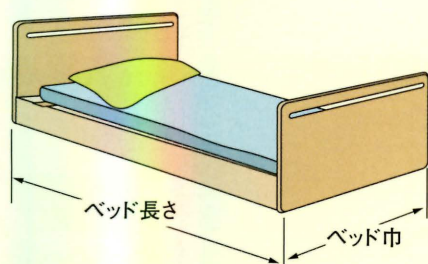

ベッドの巾


巾が広いベッドは、ご利用者が寝返りをうちやすく、巾が狭いベッドは、身体を動かせないご利用者の介護がしやすくなります。

ベッドの長さ

ご利用者の身長に合わせて選びましょう。レギュラーサイズの他に、短めのサイズや長めのサイズのベッドもあります。


ベッドのサイズ(ベッドの長さ)

ミニ

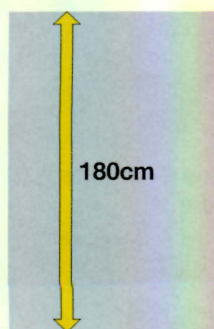


身長150cm未満の方

レギュラー

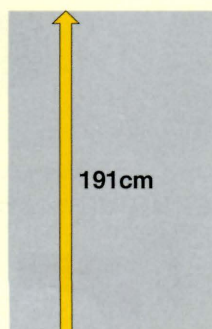

身長150cm以上の方

ベッドの設置について

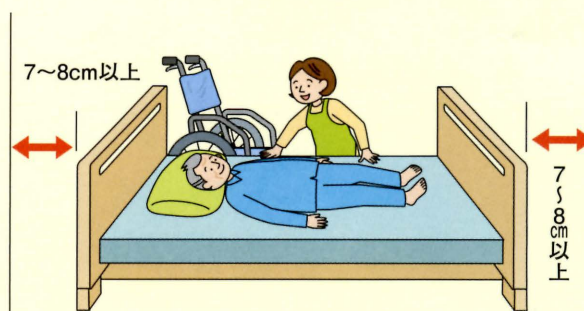

在宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加えたスペースが必要です。壁にはぴったりとつけず7~8cm以上あけます。

ベッドのサイズ(ベッドの巾)

83cm幅




接近しやすく
介護がしやすい

91cm幅



ゆったりとしたスペースと
介護のスペースを両立

100cm幅

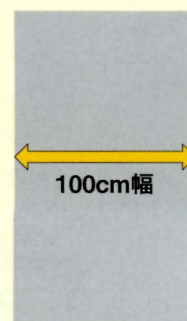

くつろぎとやすらぎを
両立する100cm幅

特殊寝台付属品
 寝すれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 車いす
 車いす付属品
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 徘徊感知機器
 移動用リフト
 自動排泄処理装置

在宅ケアベッドの上手な使い方

一般ベッド

介助バーなど、動作を補助する用具が取り付けられない。

寝返り



自力で起き上がれない場合は介護をする方の手を借りることになり、負担大。

起き上がり




介護を受ける方が自分で上半身を起こさなければいけないので、負担が大きい。

起き上がり



座りやすい高さに調節できない。

端座位

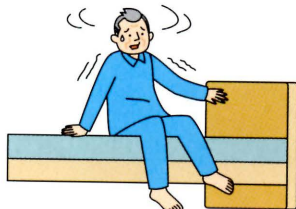

高さ調節ができない。介助バーが取り付けられないので、支持物を確保できず、不安定。

立ち上がり




立ち上がりやすい高さに調節できない。介助バーを取り付けられないので、支持物を確保しにくく不安定。

立ち上がり




介護に必要な補助用具がありません。(介助バー、ベッドサイドレールなどが取り付けられません)

補助用具の利用

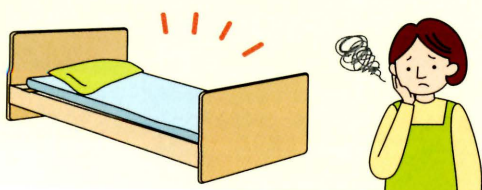

在宅ケアベッド

介助バーなど動作を補助する用具が取り付けられるので、スムーズ。

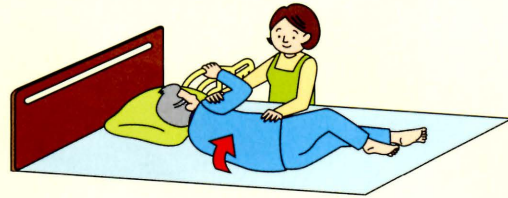


電動の背上げ機能で、スムーズ。



スイッチ操作だけで背上げ・膝上げができるので、らくに起き上がる。




高さ調節機能で適切な高さにでき、座りやすい姿勢を保つことができる。

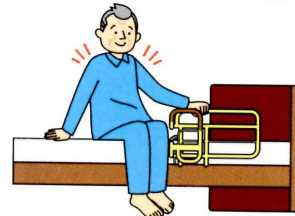


高さ調節機能と介助バー等を使って、安定した動作ができる。



高さ調節機能と介助バー等を使って安定した動作で立ち上がる。

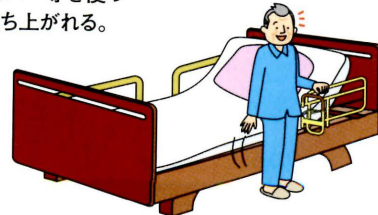


テーブル、ベッドサイドレールなど、組み合わせる補助用具(特殊寝台付属品)が目的に合わせて選べます。

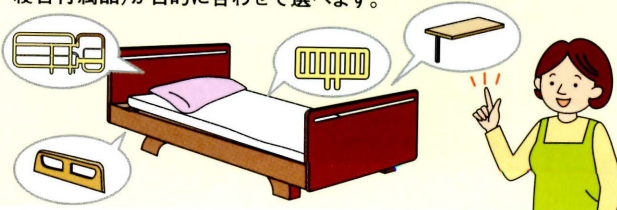


電動介護ベッドの安全なご使用方法

ベッドの高さは適切な位置に!

- ベッドの高さが高いと、乗り降りの際に転倒する恐れがあります。
- ベッドの高さは常に低めの位置か、もしくは介護を受ける方に適切な(端座位姿勢のとれる)高さにしましょう。

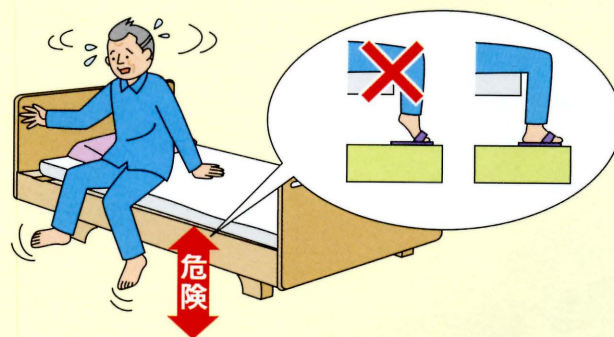

移乗の際は高さを合わせて!

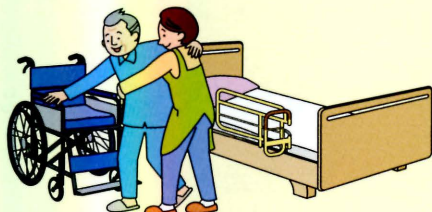

- 介護を受ける方の移乗時に、ベッドの高さが合っていないと、無理をして思わぬケガをする恐れがあります。
- 介護を受ける方を移乗させる際は、ベッドの高さを調整し、移乗しやすい高さに設定しましょう。

動くものにつかまり歩行はやめましょう!




- ベッドサイドテーブル
- オーバーベッドテーブル

- 動くもの(キャスター付きのテーブルなど)を支えにして歩くと、滑って、転倒する恐れがあります。


サイドレールは高いものを!

- サイドレールの高さが低いと、サイドレールを乗り越えて転落する恐れがあります。
- サイドレールは、介護を受ける方が側臥位の寝姿勢をとったとき、身体の中心線(鼻とへそを結ぶ線)よりも上端が高いものを選びましょう。

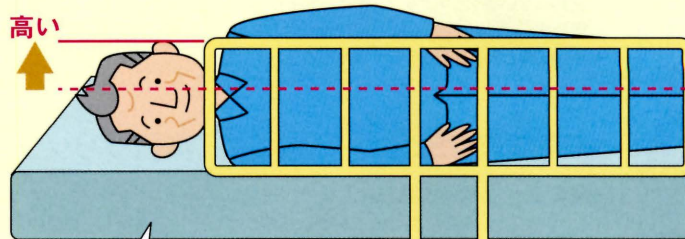


褥創予防マットレスは、厚みがありますので注意しましょう。

手元スイッチはここに掛けて!

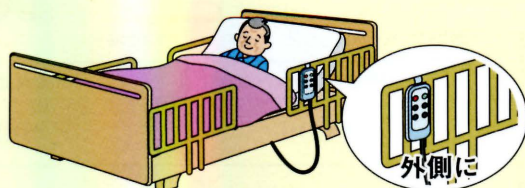

- 手元スイッチを上図の位置にかけないと、無意識にスイッチに触れて誤操作する恐れがあります。
- 手元スイッチは上図の位置にかけましょう。お使いになる方の理解度が低下している場合は、手元スイッチを手の届かないところにおきましょう。

ベッドの下などにもぐり込まないでください!

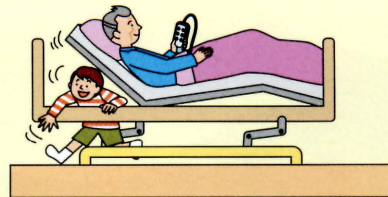

- ベッドの下にもぐり込んだり、ベッド内に身体の一部(頭や腕)などを入れないでください。ベッドの可動部分(ボトムなど)とフレームやベッドサイドレールとの間に頭・腕や足をはさんでケガをするおそれがあります。ベッドポジション操作時は、ベッドの下やうしろに障害物がないことを確認のうえ、操作してください。

楽匠 Sシリーズ らくらくモーション [樹脂木目]

TAISコード:00170-000517

●メーカー:パラマウントベッド

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-007A**

●型式:KQ-9631

質量
94.0
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-007B**

●型式:KQ-9621

質量
93.0
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-007C**

●型式:KQ-9611

質量
92.0
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-007D**

●型式:KQ-9601

質量
91.0
kg

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
11,000	1,100

楽匠 Sシリーズ 3モーター [樹脂木目]

TAISコード:00170-000518

●メーカー:パラマウントベッド

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-011A**

●型式:KQ-9331

質量
94.0
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-011B**

●型式:KQ-9321

質量
93.0
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-011C**

●型式:KQ-9311

質量
92.0
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-011D**

●型式:KQ-9301

質量
91.0
kg

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
11,000	1,100

楽匠 Sシリーズ 2モーター [樹脂木目]

TAISコード:00170-000519

●メーカー:パラマウントベッド

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-021A**

●型式:KQ-9231

質量
92.5
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-021B**

●型式:KQ-9221

質量
91.5
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-021C**

●型式:KQ-9211

質量
90.5
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-021D**

●型式:KQ-9201

質量
89.5
kg

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
9,500	950

レギュラーのベッドを足側に14cm延長できます。

延長フレームセット

●メーカー:パラマウントベッド

延長フレーム (91cm幅用)

商品番号 **C-031A**

TAISコード:00170-000526

●型式:KQ-P92L

延長マットレス (91cm幅用/厚み8cm)

商品番号 **C-031B**

TAISコード:00170-000563

●型式:KE-551L

延長フレーム (83cm幅用)

商品番号 **C-031C**

TAISコード:00170-000525

●型式:KQ-P90L

延長マットレス (83cm幅用/厚み8cm)

商品番号 **C-031D**

TAISコード:00170-000565


●型式:KE-553L

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,000	100



在宅ケアベッド 付属品

Sシリーズ専用

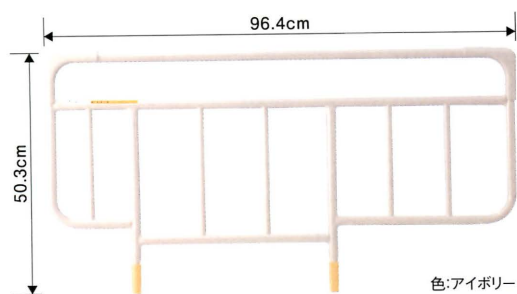

ベッドサイドレール
スタンダード(1本)


TAISコード:00170-000527

商品番号 **C-201A**

●型式:KS-161Q

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
240
ご利用者負担額
24

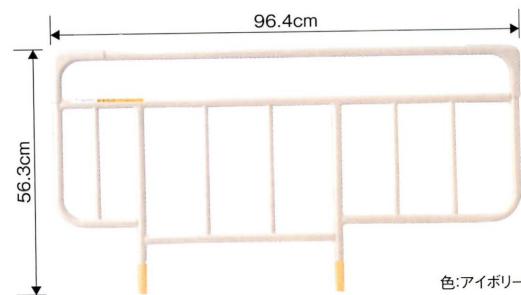

ベッドサイドレール(1本)
ハイトタイプ

TAISコード:00170-000529


商品番号 **C-201B**

●型式:KS-171Q

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
240
ご利用者負担額
24

※15cm以上厚みのあるマットレスを使用する場合にお使いください。

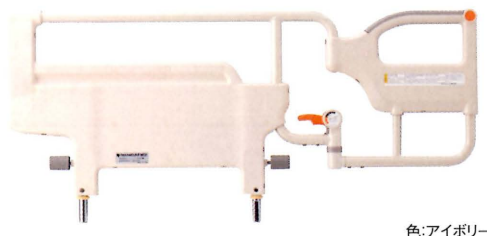

スイングアーム
介助バー


TAISコード:00170-000551

商品番号 **C-201C**

●型式:KS-096A

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
2,000
ご利用者負担額
200

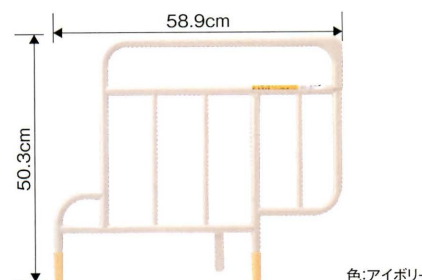

ベッドサイドレール(1本)
介助バー組合せ用


TAISコード:00170-000537

商品番号 **C-201D**

●型式:KS-151Q

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
240
ご利用者負担額
24

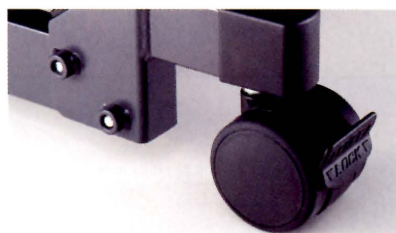

Sシリーズ専用
キャスター(4コセット)

TAISコード:00170-000560

商品番号 **C-201E**

●型式:KQ-P90C ●メーカー:パラマウントベッド

※ベッドの高さはわかりません。

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50




Sシリーズ用
キャスター付ハイトスペーサー(4コセット)

TAISコード:00170-000608

商品番号 **C-201G**

●型式:KQ-P90CH ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50

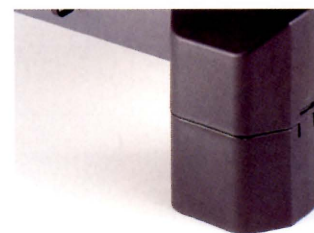

Sシリーズ専用
ハイトスペーサー(4コセット)


TAISコード:00170-000561

商品番号 **C-201F**

●型式:KQ-P90H ●メーカー:パラマウントベッド

※ベッドの高さが6.5cm高くなります。

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50

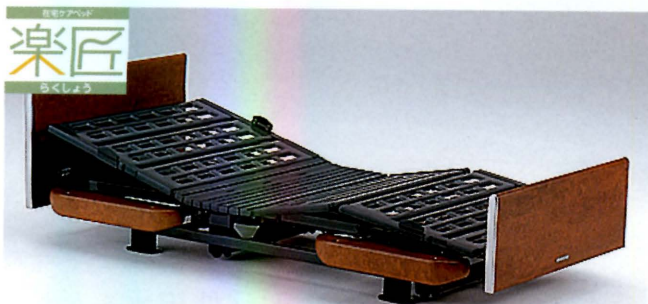

※写真は木調ダークです



楽匠 らくらくモーション [木調ダーク]

TAISコード:00170-000327

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-101A**

●型式:KQ-86340

質量
87.5
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-101B**

●型式:KQ-86240

質量
86.5
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-101C**

●型式:KQ-86140

質量
86
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-101D**

●型式:KQ-86040

質量
84
kg

楽匠 らくらくモーション [木調ライト]

TAISコード:00170-000327

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-101E**

●型式:KQ-86330

質量
87.5
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-101F**

●型式:KQ-86230

質量
86.5
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-101G**

●型式:KQ-86130

質量
86
kg

ミニ (83cm幅)


商品番号 **C-101H**

●型式:KQ-86030

質量
84
kg

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
11,500	1,150

※数量限定

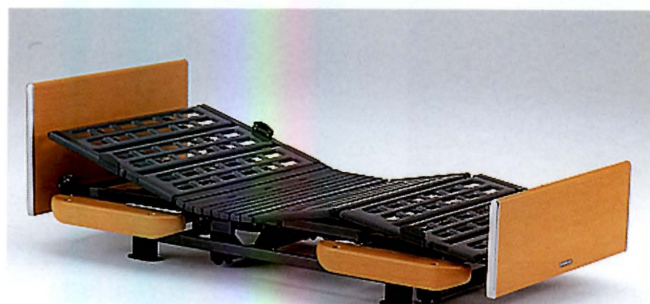

※写真は木調ライトです



楽匠 2モーター [木調ダーク]

TAISコード:00170-000343

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-131A**

●型式:KQ-82340

質量
86.5
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-131B**

●型式:KQ-82240

質量
85.5
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-131C**

●型式:KQ-82140

質量
85
kg

ミニ (83cm幅)

商品番号 **C-131D**

●型式:KQ-82040

質量
83
kg

楽匠 2モーター [木調ライト]

TAISコード:00170-000343

レギュラー (91cm幅)

商品番号 **C-131E**

●型式:KQ-82330

質量
86.5
kg

ミニ (91cm幅)

商品番号 **C-131F**

●型式:KQ-82230

質量
85.5
kg

レギュラー (83cm幅)

商品番号 **C-131G**

●型式:KQ-82130

質量
85
kg

ミニ (83cm幅)


商品番号 **C-131H**

●型式:KQ-82030

質量
83
kg

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
9,000	900

※数量限定

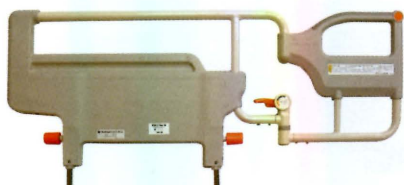


スイングアーム介助バー

TAISコード:00170-000490

商品番号 **D-311B**

●型式:KS-096 ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
2,000	200

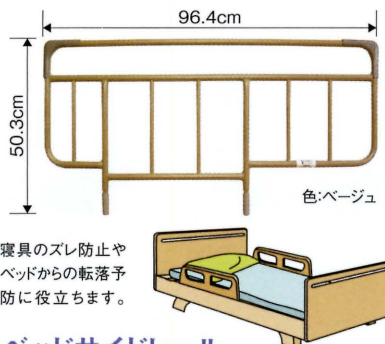

寝具のズレ防止や
ベッドからの転落予
防に役立ちます。


ベッドサイドレール

TAISコード:00170-000369

商品番号 **D-231A**

●型式:KS-165 ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
240	24

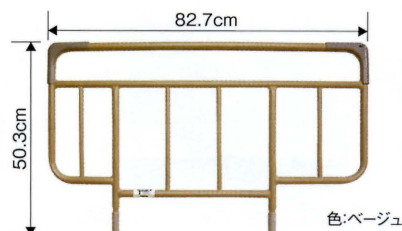


ベッドサイドレール

TAISコード:00170-000367

商品番号 **D-232A**

●型式:KS-195 ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
240	24

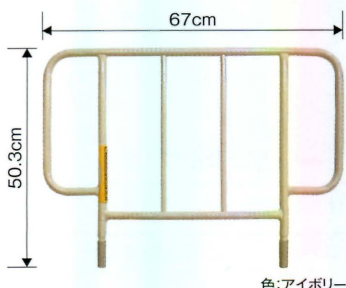

ベッドサイドレール

TAISコード:00170-000070

商品番号 **D-232G**

●型式:KA-19 ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
240	24



※オーバーテーブル、アジャスターは
ご使用できません。

ソフトガードサイドレール

TAISコード:00170-000388

商品番号 **D-301A**

●型式:KS-019 ●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50

在宅ケアベッド

使う方にも支える方にも優しい、介護用ベッドです。




KÉPROCORE®
介護保険対象商品

その名に相応しい凛とした
風格あるフォルム。
生活の中で静かに、
そして優しく使用する人を
支えます。

寸法表

セミショート

(オプション受け使用時) 99.6
(オプション受け収納時) 93

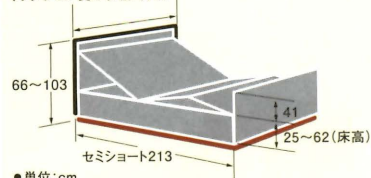

●単位:cm

- 本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
- ヘッド・フットボード/樹脂製(木目シート貼り)

【スイングバック機能】



背上げの支点を
後方にスライド
させながら背上
げをする機能で
す。身体への圧
迫感や負担を軽
減するとともに、

前ズレを抑え、自然な座位を保てます。大腿長の
長さが日本人の平均体型(44cm)に対応するよう
に配慮されているので、身体の前ズレが最小限に抑
えられ常に身体に優しくフィットします。

【格納式オプション受け】



未使用時にはボトム下部に格納することができ
ます。格納することで、ベッドからの突出がな
くなるため、ベッドの乗り降りや車いすのアプ
ローチがより簡単に行えます。

【グリップ付きボード】




伝い歩きをサポートするグリ
ップをボード上部に設け、生
活支援機能の向上を実現しま
した。

【フリーホイール機能】



モーターの強制力が加わらな
いフリーホイール機能を搭載。
万一ボトム下に身体の一部が
挟まった場合でも安心です。

【ケアモーション】 K-720A 専用機能

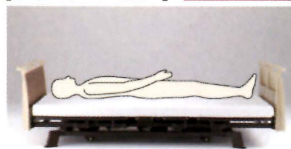

前ズレを抑制



前ズレを抑制



腹圧を軽減

背上げと同時に足上げを開始します。
足上げが約15°になると自動で足さ
げ動作に移行しますので自然な座位
を保ちながら身体の前ズレを最小限
に抑えます。背上げが最大70°にな
ると足はフラットになるため、腹圧
も軽減できます。



- 型式:K-730(セミショート)
- メーカー:シーホネンス



和夢シリーズ
凜 3モーター

質量
78.5
kg

TAISコード:00167-000155 商品番号 C-008A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
10,000	1,000



- 型式:K-720A(セミショート)
- メーカー:シーホネンス



和夢シリーズ
凜 2モーター ケアモーションタイプ


質量
77.5
kg

TAISコード:00167-000153 商品番号 C-008B

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
9,000	900

在宅ケアベッド 付属品

和夢 凛シリーズ専用

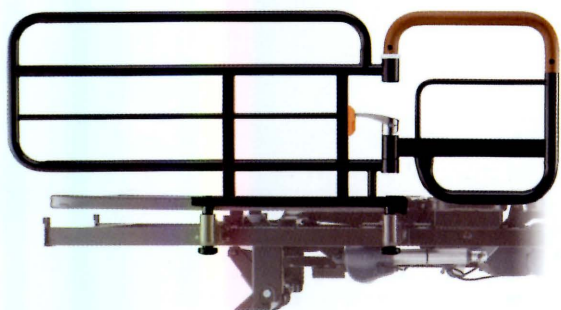

回転式アーム介助バー

TAISコード:00167-000138

商品番号 **C-221A**

- 型式:K-40R
- メーカー:シーホネンス
- サイズ(cm):119.6×51

希望月極レンタル料金

2,000

ご利用者負担額

200



- サイドレールの取り付け位置変更可能(JIS認証)
ご利用者の状態や介護の状況に合わせて取り付け位置が変更できます。**中央差しでも使用可能**で、転落防止の安全性を高めました。
- あたま側に差すと、介助バーまで必要としない場合に、端座位がきちんと取れる開口幅が確保できます。

サイドレール

TAISコード:00167-000183

商品番号 **C-221C**


- 型式:K-173
- メーカー:シーホネンス
- サイズ(cm):84×41 (ボトム面から)

希望月極レンタル料金

240

ご利用者負担額

24

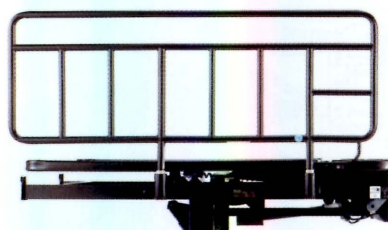

サイドレール

TAISコード:00167-000152

商品番号 **C-221B**

- 型式:K-170SS ●メーカー:シーホネンス
- サイズ(cm):99.5×41 (ボトム面から)
- ※足側でも頭側でも使えます

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
240	24




凛用キャスター (4個セット 2個ロック付)

TAISコード:00167-000134

商品番号 **C-221E**

- 型式:K-127 ●メーカー:シーホネンス
- キャスター径:φ10cm 双輪キャスター
- 取付時ベッド高さ(ボトムまで)(cm):28

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50

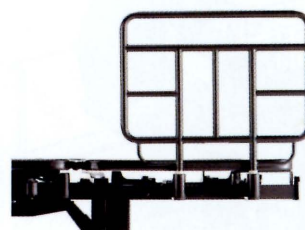

サイドレール

TAISコード:00167-000151


商品番号 **C-221D**

- 型式:K-172 ●メーカー:シーホネンス
- サイズ(cm):52×41 (ボトム面から)
- セミショート足側専用

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
240	24


取付け例

◎JISで認証された組み合わせと取付け位置

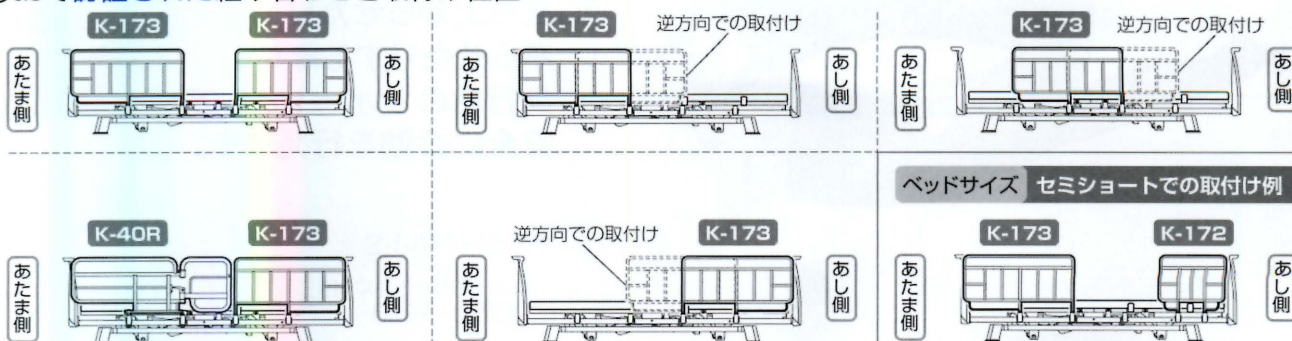

◎JISで認証されない組み合わせと取付け位置



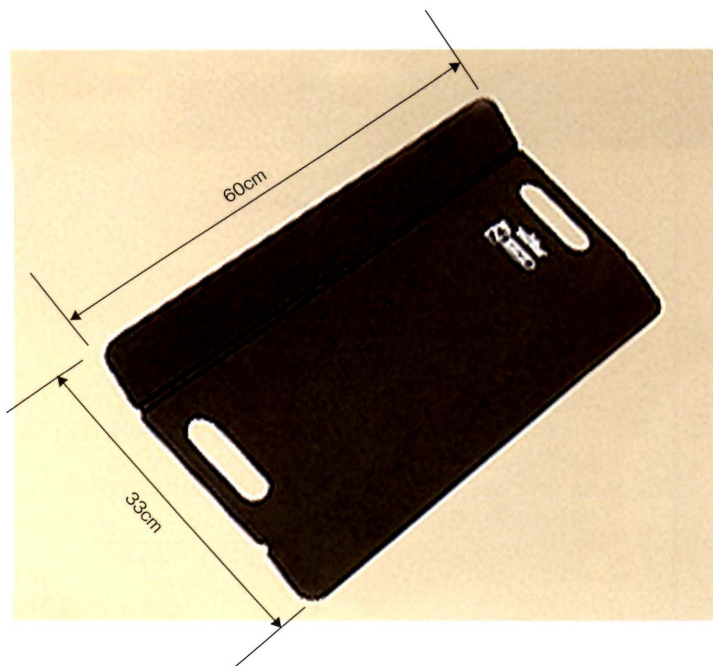

高い強度と優れた柔軟性
により座ったままでの乗り降り
が可能です。

イージーグライドM


TAISコード:00170-000570

商品番号 **D-361A**


●型式:KZ-A29036

●メーカー:ロメディック・ジャパン ●耐荷重(kg):135

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
800	80

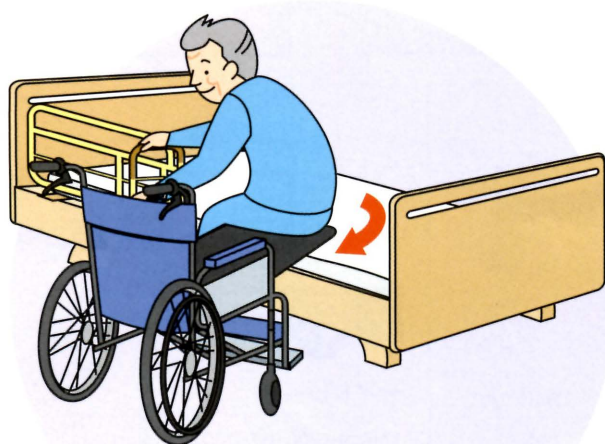

表面が滑りやすく移乗先と橋渡しするように
設置する事で、座位のままお尻を滑らせて移乗できます。

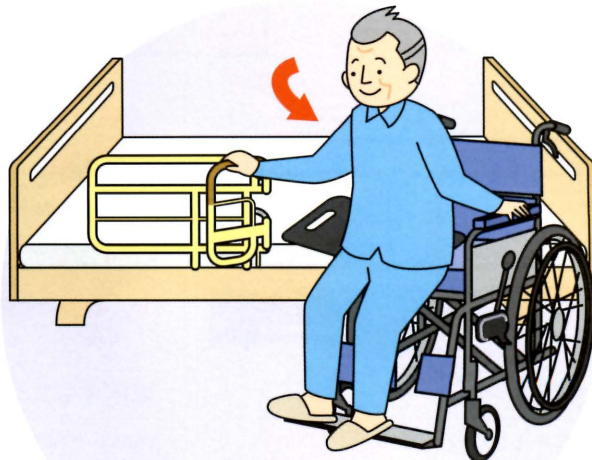

車イスのアームレストを外しイージーグライドを
挿入すると自立移乗も出来ます。



立ち上がらせたり、
座らせたりする際や、
歩行時のサポートとして
安全に介助を行えます。

マスターベルトS

TAISコード:00245-000144

商品番号 **D-361B**

●メーカー:ラックヘルスケア

●サイズ(cm):S62~100(ウエスト目安)

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
2,000	200



バックルはサイドロック採用で
装着はいたって簡単です



利用イメージ



ベッドサイドテーブル


TAISコード:00170-000263

商品番号 **D-341B**

●型式:KF-196

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
3,500
ご利用者負担額
350

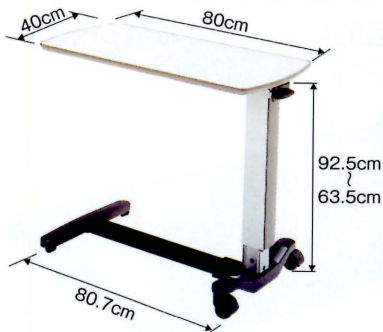

ベッドサイドテーブル

TAISコード:00170-000233

商品番号 **D-341A**


●型式:KF-192

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
3,500
ご利用者負担額
350



キャスター付きで、テーブルの移動が簡単です。使用する方にあった高さ調節が可能です。

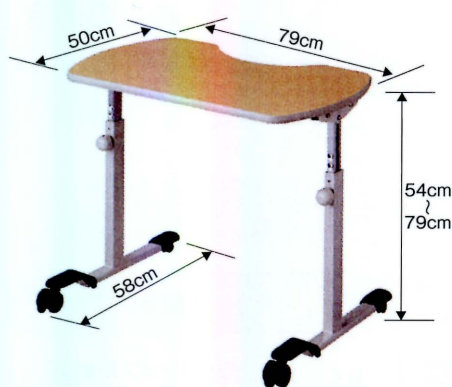

リハビリテーブル


TAISコード:00170-000489

商品番号 **D-358B**

●型式:KF-840

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
3,500
ご利用者負担額
350

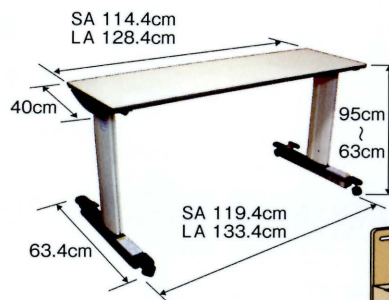


オーバーベッドテーブル

TAISコード:KF-833LA→00170-000315
KF-833SA→00170-000316

商品番号 **KF-833LA→D-345A**
KF-833SA→D-345B


●型式:KF-833LA、KF-833SA

●メーカー:パラマウントベッド

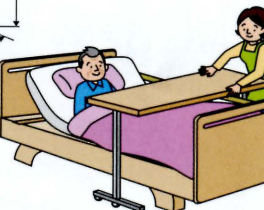

キャスター付きで、高さ調節が可能です。

希望月極レンタル料金
3,500
ご利用者負担額
350

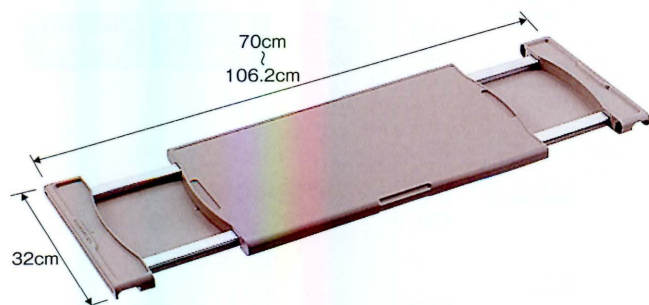

アジャストテーブル


TAISコード:00170-000188

商品番号 **D-355A**

●型式:KQ-090

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
500
ご利用者負担額
50

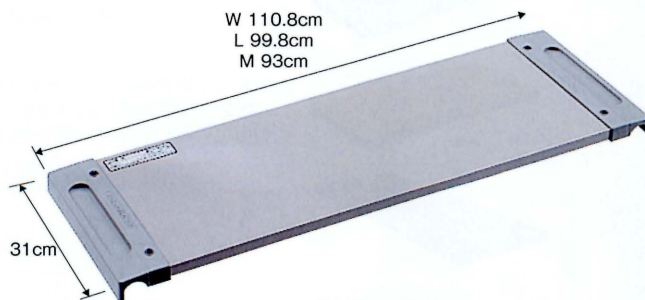

オーバーテーブル

TAISコード:KQ-060L→00170-000374
KQ-060M→00170-000373
KQ-060W→00170-000375

商品番号 **KQ-060L→D-351A**
KQ-060M→D-351B
KQ-060W→D-351C

●型式:KQ-060L、KQ-060M、KQ-060W

●メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金
500
ご利用者負担額
50

マットレスの選び方

お使いになる方の状態や目的に合わせてお選びください。



ベッド上とベッドまわりでどのような生活をしますか？

- ☐ 就寝時に使用 ☐ 就寝と日中の休息に使用
☐ 大半をベッドで過ごす

マットレスを選ぶにあたって、優先したいことは何ですか？

- ☐ 立ちあがり ☐ 端座位 ☐ 床ずれ予防

マットレスを選びます。迷ったときは、ケアマネージャーに相談。

マットレスの種類

一般用マットレス



在宅ケアベッドに適した構造のマットレスです。

マットレスを選ぶ際のポイント

動作のしやすさ

動作をしやすいのは、人のからだの柔らかさに近いマットレスや、やや硬めのマットレスです。

マットレスの製品特性

立ち上がりのしやすさや端座位を取ったときの安定性、体圧分散性なども考慮する必要があります。また、お手入れの面から、重さや拭き取りやすさがポイントとなります。

寝具の好み



普段から使い慣れている寝具に近いものが馴染みやすいのですが、柔らかすぎるマットレスを選ぶと、体を動かすににくいといった事も起こります。

ベッドとの適合

ベッドの寸法や機能に合わせて、必ず適合するマットレスを選びましょう。

マットレス一覧表 (参考資料)

単位:cm

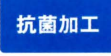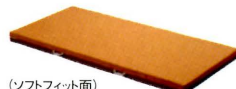かため	品 名	サイズ		特殊加工など
		幅	高さ	
かため	 ナーシングスター マットレス	91cm幅 83cm幅	8.5cm	ウォッシュابل対応 ポリエステル固綿100%
	 プレグラー マットレス	91cm幅 83cm幅 100cm幅	8.0cm	 グリーン購入法 適合  抗菌加工  難燃加工
	 ミュー マットレス	91cm幅 83cm幅	8.0cm	ミュースリット加工 リバーシブル構造
	 エバーフィット マットレス (ハードフィット面)	91cm幅 83cm幅 100cm幅	10.0cm	 グリーン購入法 適合  対MRSA 抗菌加工  難燃加工
	 (ソフトフィット面) ※エバーフィットマットレスはハードフィット面、ソフトフィット面のリバーシブルです。それぞれの面で、柔らかさが異なります。			
	 イントロ	91cm幅 83cm幅	8.0cm	ウレタンフォーム3層構造 リバーシブル構造
	 ソフィア マットレス	91cm幅 83cm幅 100cm幅	10.0cm	リバーシブル構造
柔らかめ	 アルファプラ すくっと	91cm幅 83cm幅	9.0cm	ゲルサンド構造



このマークの付いた製品は、材料・工法などで地球環境に与える負荷を減らし、グリーン購入法に基づく特定調達物品の基準を満たしています。

対MRSA
抗菌加工

MRSAに対して優れた抗菌効果を発揮します。黄色ブドウ球菌、大腸菌などにも有効です。

抗菌加工

バイオファーム加工。に
おいの元になる細菌や
カビの繁殖を阻止。

難燃加工

燃えにくいカ
バーを使用。

※抗菌効果は、菌の増殖を抑制するもので、殺菌ではありません。 ※抗菌剤による人体への影響はありません。

ややかため

寝心地のよい固綿敷ふとん
感覚のマットレスです。

ナーシングスター マットレス

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00109-000104

商品番号 **D-190A**

●型式:SH

●メーカー:西川リビング

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚8.5

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00109-000104

商品番号 **D-190B**

●型式:SSH

●メーカー:西川リビング

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚8.5

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

ややかため

伸びて曲がるキューマラインボトムの
ベッドに最適です。
全体に柔軟性があり、良く曲がります。

プレグラール マットレス



抗菌加工

難燃加工

レギュラー (100cm幅)

TAISコード:00170-000444

商品番号 **D-201E**

●型式:KE-557Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅99×厚8

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000159

商品番号 **D-201A**

●型式:KE-551Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅91×厚8

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000142

商品番号 **D-201B**

●型式:KE-553Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅83×厚8

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00170-000286

商品番号 **D-201C**

●型式:KE-5511Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長180×幅91×厚8

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00170-000285

商品番号 **D-201D**

●型式:KE-5531Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長180×幅83×厚8

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

やや柔らかめ／ふつう

リバーシブル

超通気性ウレタンフォームでムレを排除。
ミュースリット加工のリバーシブル仕様。

ミュー マットレス (通気タイプ)

超通気
ウレタンフォーム

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00206-000065

商品番号 **E-383B**

●型式:CR521

●メーカー:ケーブ

●サイズ(cm):長191×幅90×厚8

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00206-000065

商品番号 **E-383A**

●型式:CR520

●メーカー:ケーブ

●サイズ(cm):長191×幅83×厚8

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00206-000065

商品番号 **E-383C**

●型式:CR522

●メーカー:ケーブ

●サイズ(cm):長180×幅90×厚8

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

徘徊感知機器

移動用リフト

自動排泄処理装置

特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位調整用具
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
体位感知機器
移動用リフト
電動滑動式昇降機

やや柔らかめ／かため
リバーシブル

動きやすく、寝心地が選べる
リバーシブルマットレス。



エバーフィット マットレス
(防水タイプ)

グリーン購入法
適合

対MRSA
抗菌加工

難燃加工

レギュラー (100cm幅)

TAISコード:00170-000398

商品番号 **D-161E**

●型式:KE-527Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅99×厚10

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000389

商品番号 **D-161A**

●型式:KE-521Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅91×厚10

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000390

商品番号 **D-161B**

●型式:KE-523Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅83×厚10

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00170-000396

商品番号 **D-161C**

●型式:KE-5211Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長180×幅91×厚10

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00170-000397

商品番号 **D-161D**

●型式:KE-5231Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長180×幅83×厚10

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

柔らかめ～かため
リバーシブル

動きやすく寝心地が選べる
リバーシブルマットレス。



エバーフィット マットレス
(通気タイプ)

グリーン購入法
適合

対MRSA
抗菌加工

難燃加工

レギュラー (100cm幅)

TAISコード:00170-000439

商品番号 **D-162E**

●型式:KE-577Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅99×厚10

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000438

商品番号 **D-162A**

●型式:KE-571Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅91×厚10

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000437

商品番号 **D-162B**

●型式:KE-573Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長191×幅83×厚10

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00170-000441

商品番号 **D-162C**

●型式:KE-5711Q

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):長180×幅91×厚10

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00170-000440

商品番号 **D-162D**

●型式:KE-5731Q

●メーカー:パラマウントベッド



●サイズ(cm):長180×幅83×厚10

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

やや柔らかめ／ややかため

リバーシブル

かたさの異なるウレタンフォーム3層構造で、
適度な寝心地と安定性を両立した、
リバーシブルマットレス。

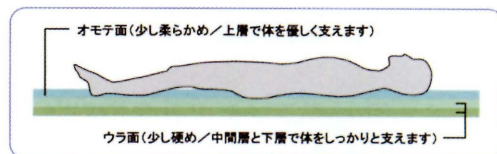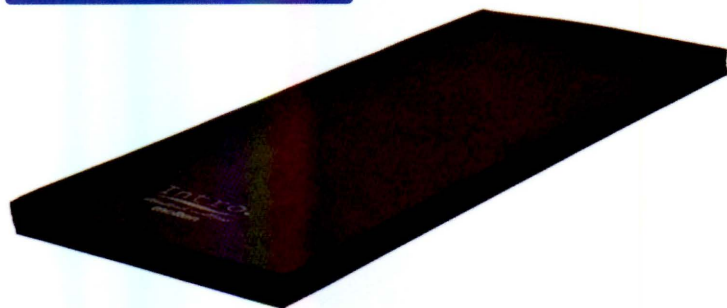

3層構造／リバーシブル構造

- ◆体を優しく支える上層と、しっかり支える中間層＋下層の3層構造により、適度な寝心地と寝返りや立ちあがりしやすい安定感を両立しました。
- ◆かたさの異なるリバーシブル(両面)仕様なので、オモテ面(少し柔らかめ)とウラ面(少し硬め)を好みで使い分けることができます。
- ◆“へたり”が発生しにくい特殊な中密度高反発系ウレタンフォームを使用しています。
- ◆衛生面と感染対策を考慮した防水カバーで、マットレスが汚れた時は素早く清拭できます。

イントロ (防水タイプ)



対MRSA
抗菌加工

難燃加工

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000134

商品番号 **D-163A**

●型式:MIT91

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長191×幅91×厚8

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000134

商品番号 **D-163B**

●型式:MIT83

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長191×幅83×厚8

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
2,000	200

やや柔らかめ／ふつう

リバーシブル

快適性を考慮した通気カバー。
お好みの硬さが選べる
リバーシブル仕様。

ソフィア マットレス (通気・洗浄タイプ)



希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

レギュラー (100cm幅)

TAISコード:00054-000035

商品番号 **D-155E**

●型式:MHAV10100A

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長191×幅100×厚10

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000035

商品番号 **D-155A**

●型式:MHAV1091

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長191×幅91×厚10

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000035

商品番号 **D-155C**

●型式:MHAV1083

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長191×幅83×厚10

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00054-000035

商品番号 **D-155D**

●型式:MHAV1091S

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長180×幅91×厚10

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00054-000035

商品番号 **D-155B**

●型式:MHAV1083S


●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長180×幅83×厚10

やや柔らかめ

起き上がりや立ち上がりが
簡単にできるよう
マットの両端が硬い作りです。

アルファプラ すくっと (通気タイプ)

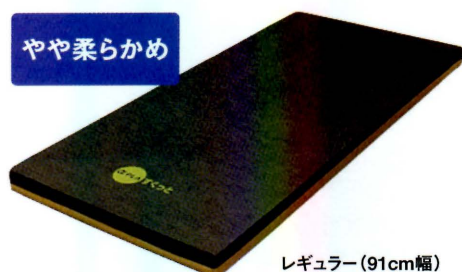

希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00563-000021

商品番号 **E-372E**

●型式:A1R

●メーカー:タイカ

●サイズ(cm):長191×幅91×厚9

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00563-000019

商品番号 **E-372F**

●型式:A3R

●メーカー:タイカ

●サイズ(cm):長191×幅83×厚9

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00563-000022

商品番号 **E-372G**

●型式:A1S

●メーカー:タイカ

●サイズ(cm):長180×幅91×厚9

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00563-000020

商品番号 **E-372H**

●型式:A3S

●メーカー:タイカ

●サイズ(cm):長180×幅83×厚9